



avoset™

Beknopte handleiding

Doorgaande toediening

Rev. 3.0 softwareversie



Inhoudsopgave

Doorgaan infusie – Basisfuncties

Review voorgeprogrammeerde infusieparameters	4
Review infusieparameters tijdens infusie	5
Een nieuwe infusie programmeren	6
Infusieparameters wijzigen voordat de infusie begint	8
De snelheid tijdens infusie wijzigen	9

 Deze beknopte handleiding biedt richtlijnen voor de basisfuncties van de Avoset-infusiepomp. Als u geen arts bent, raadpleeg dan de handleiding Belangrijke gebruiksinformatie voor aanvullende informatie en het veilige gebruik van het product. Zie voor clinici die de beknopte handleiding gebruiken de gebruikershandleiding en de gebruiksvoorwaarden van het trainingsmateriaal op onze website: www.eitanmedical.com/term_training_materials

Deze pagina is opzettelijk leeg gelaten



Review voorgeprogrammeerde infusieparameters

Druk **VOLGENDE** om tussen de infusieparameters te navigeren



Druk **REVIEW** multifunctionele knop om de infusieparameters te zien

1e parameter:
De infusiesnelheid

2e parameter:
Het totale volume dat tijdens de infusie moet worden geïnfuseerd

3e parameter:
De benodigde tijd om de infusie te voltooien. Druk op **GEREEID** om de beoordeling van de parameters te voltooien

Terug naar hoofdscherm (**REVIEW** optie is opnieuw beschikbaar)



Afhankelijk van de infusieprogrammering kunnen aanvullende parameters worden weergegeven. Raadpleeg de gebruikershandleiding voor meer informatie.

Review infusieparameters tijdens infusie


Druk op VOLGENDE om door de infusieparameters te bladeren



Druk INFO multifunctionele knop om de infusieparameters te zien



1e parameter:
De resterende tijd voordat de infusie eindigt

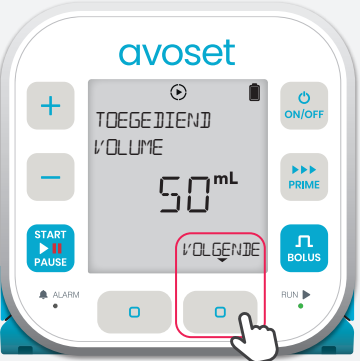

2e parameter:
Het totale geïnfuseerde volume wordt weergegeven



3e parameter:
Het resterende te infuseren volume wordt weergegeven. Druk op de multifunctionele knop GEREED om naar het hoofdscherm te gaan




Terug naar het hoofdscherm (INFO is optie weer beschikbaar)

- i** Afhankelijk van de infusieprogrammering kunnen aanvullende parameters worden weergegeven. Raadpleeg de gebruikershandleiding voor meer informatie
- Tip:** lang indrukken van de knop VOLGENDE actie keert terug naar het startscherm



Een nieuwe infusie programmeren – Op snelheid gebaseerde programmering

Wanneer de pomp geen vooraf gedefinieerd infusieprogramma heeft, kan de pomp handmatig worden geprogrammeerd met snelheid en VTBI of met VTBI en duur, afhankelijk van de pompconfiguratie.

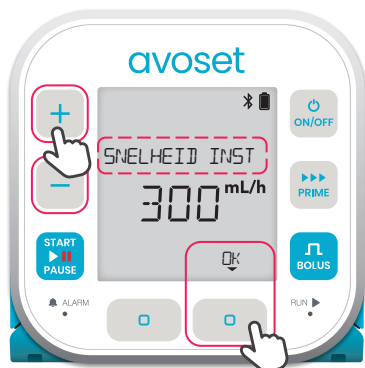

1. Gebruik de **+** / **-** toetsen en druk op OK zodra de vereiste snelheid is bereikt



2. Gebruik de **+** / **-** toetsen en druk op OK zodra de vereiste VTBI is bereikt



3. Review de ingestelde parameters, en druk **BEVESTG** multifunctionele knop om het programma te bevestigen



4. Druk **START** om de infusie te starten



Het pictogram Uitvoeren draait


Groen lampje knippert

5. De infusie loopt




Merk op dat de pomp de infusieparameters verwijdt nadat de infusie is voltooid.

Een nieuwe infusie programmeren – Op duur gebaseerde programmering

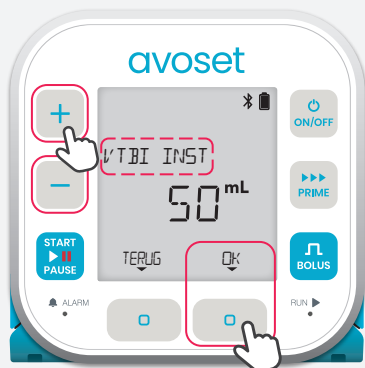

1. Gebruik de + / - toetsen en druk op OK zodra de vereiste VTBI is bereikt

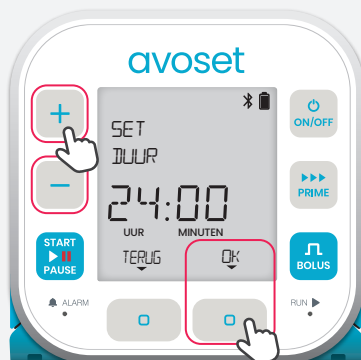


2. Gebruik de + / - toetsen en druk op OK zodra de vereiste duur is bereikt



3. Druk op VOLGENDE multifunctionele knop om de ingestelde parameters te reviewen



4. Controleer de ingestelde VTBI en druk vervolgens op de multifunctionele knop BEVESTG om deze te bevestigen

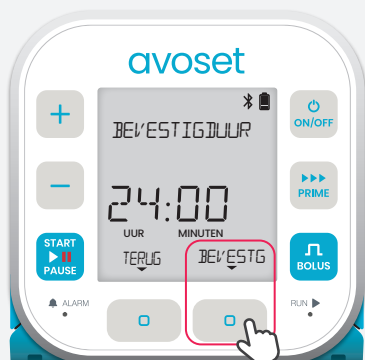

5. Review de ingestelde duur en druk vervolgens op de multifunctionele knop BEVESTG om deze te bevestigen



6. Review de berekende snelheid en druk vervolgens op de multifunctionele knop BEVESTG om het programma te bevestigen



7. Druk  om de infusie te starten



8. De infusie loopt




Infusieparameters wijzigen voordat de infusie begint

Voordat u met de infusie begint, kunt u de geprogrammeerde parameters – VTBI en de snelheid of duur (afhankelijk van de geconfigureerde programmeermethode) wijzigen. Wijzigingen zijn ook van toepassing op toekomstige herhaalde infusies. Het onderstaande voorbeeld toont hoe u de snelheid bewerkt en de VTBI onveranderd houdt.




1. Druk op de **BEWERK** multifunctionele knop om de infusieparameters te wijzigen

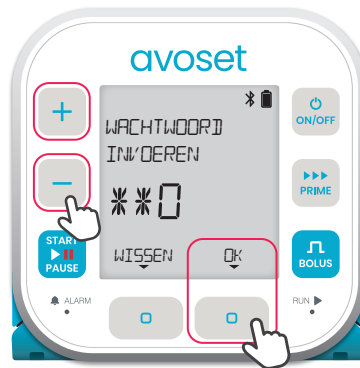

2. Het kan nodig zijn om een wachtwoord in te voeren.



3. De pomp vraagt u om de snelheid in te stellen. Gebruik de **+** / **-** toetsen om de snelheid te verhogen/verlagen

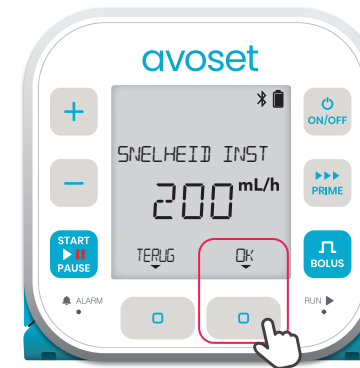

4. Druk op de **OK** multifunctionele knop om de snelheid in te stellen.



5. Om aanvullende parameters te bewerken druk **JA** op de multifunctionele knop. om te beëindigen druk **NEE**



6. Druk op **BEVESTIG** op de multifunctionele knop om de geselecteerde snelheid te bevestigen



7. Druk **START PAUSE** om de infusie te starten



Het pictogram Uitvoeren draait

Groen lampje knippert

8. De infusie loopt

De snelheid tijdens infusie wijzigen

De nieuwe waarde wordt opgeslagen voor toekomstige herhaalde infusies.



1. Druk op de **START** knop om de infusie te pauzeren



2. Druk op de multifunctionele knop **BEWERK**



3. Het kan nodig zijn om een wachtwoord in te voeren



4. De pomp vraagt u om de snelheid in te stellen.
Gebruik de **+** / **-** toetsen om de snelheid te verhogen/verlagen



5. Druk op de **OK** multifunctionele knop zodra de vereiste snelheid is bereikt



6. Druk op **BEVESTIG** op de multifunctionele knop om de geselecteerde snelheid te bevestigen



7. Druk op de **START** knop om de infusie te hervatten



Het pictogram
Uitvoeren draait

Groen lichtje
knippert

8. De infusie loopt



Deze pagina is opzettelijk leeg gelaten

Deze pagina is opzettelijk leeg gelaten



