



avoset™

Beknopte handleiding Algemeen

Rev. 3.0 softwareversie




Inhoudsopgave

Indeling Avoset-pomp	4
Installatie	5
Infusie instellen	6
Batterijen plaatsen	7
De pomp inschakelen	9
De medicatiezak aanprikken	10
Toedieningsset bevestigen	11
Vullen (lucht verwijderen)	12
Infusie Basisfuncties	15
Een nieuwe voorgeprogrammeerde infusie starten	16
Pauzeren infusie	17
De pomp uitschakelen	18
Infusie hervatten of nieuwe zak starten	19
Melding laag reservoirstvolume	20
Einde van infusie en laatste infusie herhalen	21
KVO na infusie afsluiten	22
Ontgrendelen met een wachtwoord	23
Toedieningsset verwijderen	24
Problemen met alarmen oplossen	25

 Deze beknopte handleiding algemeen biedt richtlijnen voor de basisfuncties van de Avoset-infusiepomp. Als u geen zorgverlener bent, raadpleeg dan de handleiding voor veilig gebruik voor aanvullende informatie en het veilige gebruik van het product. Als u een zorgverlener bent, raadpleeg dan de gebruikershandleiding en de gebruiksvoorwaarden van dit document, gebruik www.eitanmedical.com/term_training_materials.



Indeling Avoset-pomp

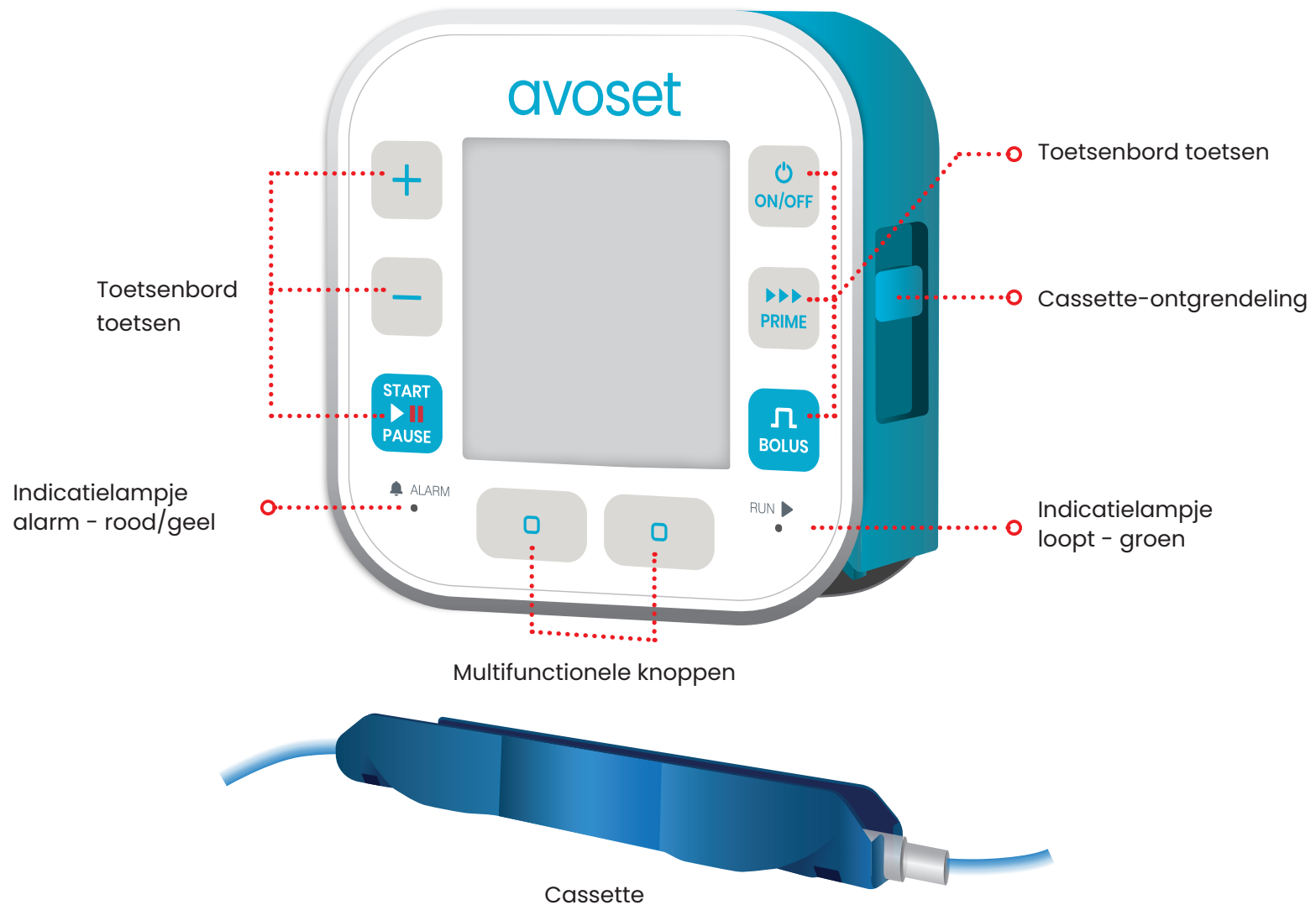


Installatie



Infusie instellen

Als de behandeling voor levensondersteunende medicatie is, moet u altijd een tweede pomp bij de hand houden als back-up. Houd altijd een nieuwe set AA-batterijen bij de hand als back-up. Plaats altijd een nieuwe set batterijen wanneer u een nieuwe infusie start.

1. Plaats batterijen (zie pagina 7)
2. Schakel de pomp in (zie pagina 8)
3. Klem de set af (zie pagina 9)
4. De medicatiezak aanprikken (zie pagina 9)
5. Verwijder de AFFV-ontgrendel clip (zie pagina 10)
6. Bevestig de cassette aan de pomp (zie pagina 10)
7. Open alle klemmen (zie pagina 12)
8. Vullen – lucht verwijderen (zie pagina 12)
9. Sluit de set aan op de patiënt (zie pagina 12)

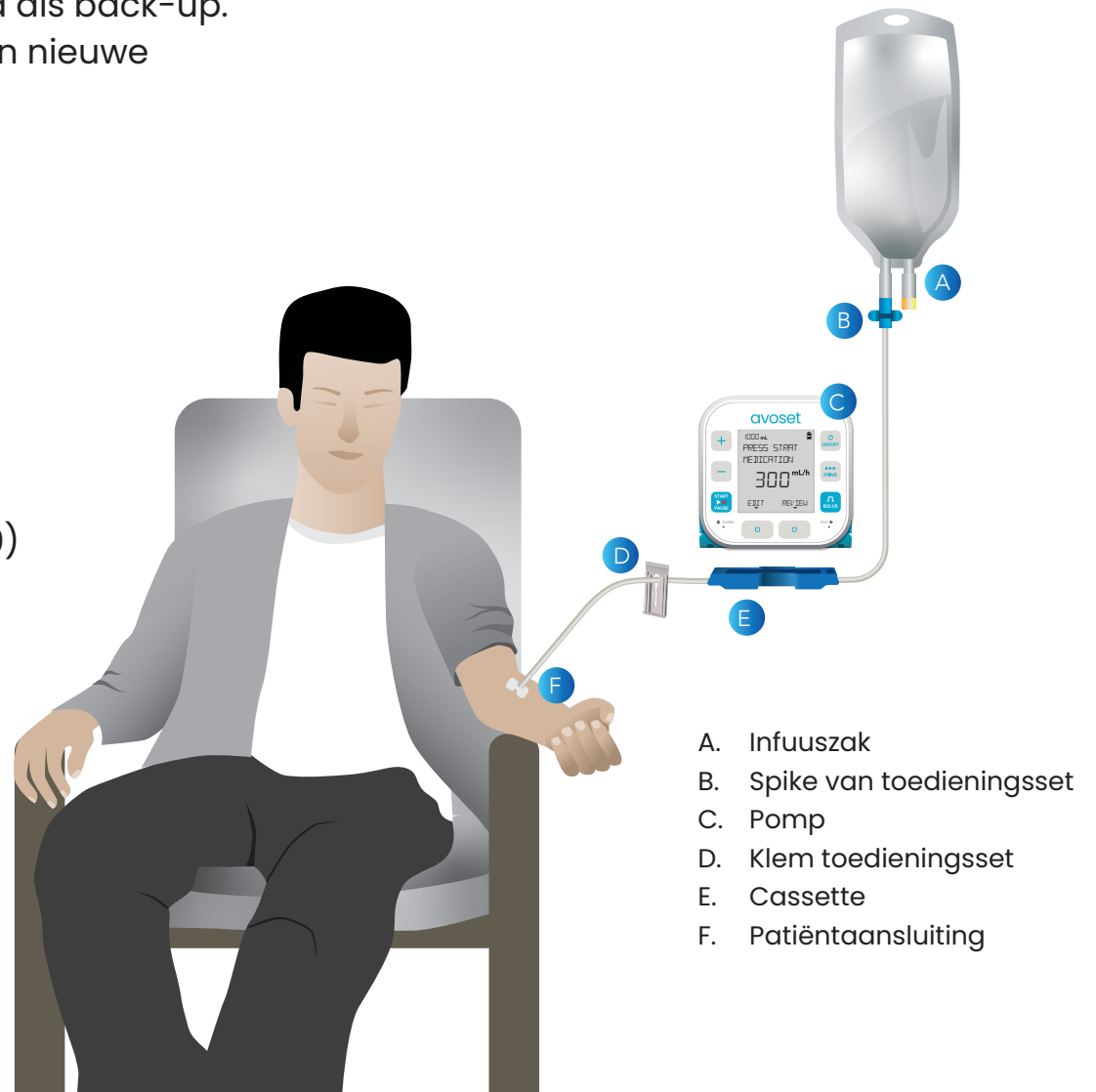


Batterijen plaatsen

Schakel de pomp altijd uit voordat u batterijen plaatst of vervangt.



Waarschuwing


- Inspecteer eerst – plaats geen batterijen voordat u hebt gecontroleerd of het batterijvak schoon en droog is
- Vervang alle batterijen in één keer, meng geen nieuwe en oude batterijen of verschillende soorten batterijen met elkaar
- Verwijder geen batterijen terwijl de infusie bezig is
- Gebruik geen lithiumbatterijen
- Open het batterijvak alleen als u de batterijen vervangt

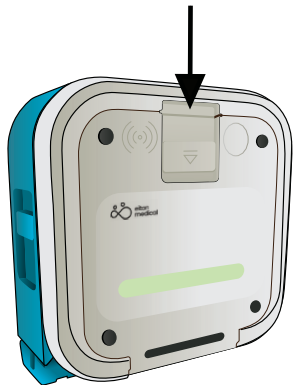

1. Druk de grendel van het batterijdeksel omlaag om het te openen



2. Plaats 3 AA (1,5 V) batterijen volgens het diagram in het batterijvak. Schuif eerst het negatieve (-) uiteinde, druk de veer in en klik het positieve (+) uiteinde op zijn plaats

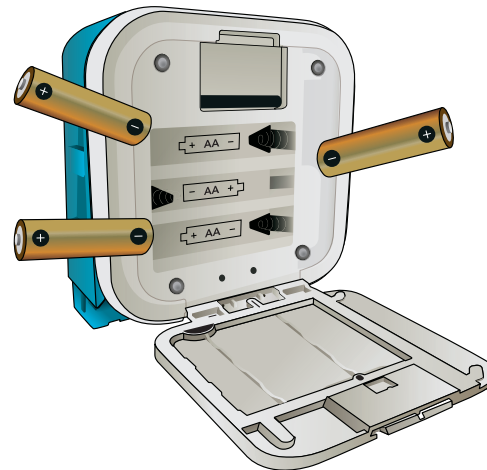

3. Sluit de batterijdeksel



Levensduur batterij

Onderstaande tabel toont hoeveel uur de pomp naar verwachting op nieuwe batterijvoeding zal werken voordat de batterijen leeg zijn.

Infusiesnelheid	Tijd dat de pomp naar verwachting zal werken met nieuwe batterijen	
	Alkaline (Duracell plus AA LR6/MN1500)	Oplaadbaar (NiMH Duracell oplaadbaar 2500 mAh)
1 ml/u	280 uur	270 uur
2 ml/u	260 uur	220 uur
5 ml/u	190 uur	150 uur
25 ml/u	75 uur	70 uur
300 ml/u	15 uur	12 uur

 Deze resultaten werden aangetoond met Duracell plus AA LR6/MN1500 en NiMH Duracell oplaadbare 2500 mAh. Verdere technische informatie over de levensduur van de batterij is te vinden in de gebruikershandleiding van de Avoset-infuus pomp. Neem contact op met uw dienstverlener voor ondersteuning.

De pomp inschakelen



1. Druk hierop  om de pomp in te schakelen



2. Het tussentijdse scherm
Systeem zelfcontrole wordt weergegeven



Let op

Gebruik de pomp niet als tijdens het automatische systeemcontrole een van de volgende situaties optreedt:

1. Het scherm licht niet op, of
2. Het pompscherm is beschadigd (zwarte of witte gebieden bedekken het scherm)
3. De pomp piept niet, of
4. De led indicatielampjes gaan niet branden



3. Pomp is klaar



Als de pomp u vraagt of u de infuuszak wilt hervatten of een nieuwe moet starten:

Om een infusie met het resterende volume in de zak te hervatten, drukt u op de multifunctionele knop **HERVATTEN** (zie pagina 19).

OF;

Om een nieuwe infusie met een nieuwe zak te starten, drukt u op de multifunctionele knop **NIEUWE ZAK** (zie pagina 19)




Als de pomp u vraagt om de laatste infusie te bewerken:


Een of meer parameters zijn bewerkt tijdens de laatste infusie. Druk op **REVIEW** en bevestig alle parameters totdat u bij het startscherm bent (zie stap 3 hierboven).



De medicatiezak aanprikken

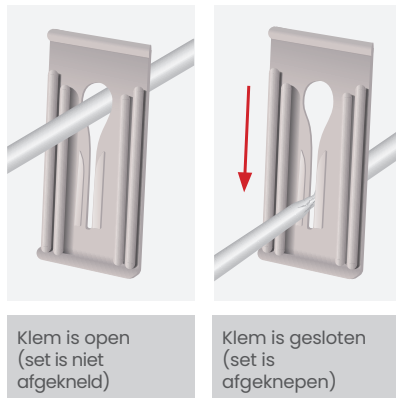

1. Sluit de klem op de set

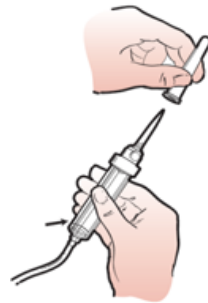

2. Verwijder de beschermkap
van de punt van de set




3. Steek de punt van de spike
in de spikepoort van de
medicatiezak




4. Hang de medicatiezak
aan een daarvoor bestemde
hanger, bijvoorbeeld: een
infuuspaal

i Lees de handleiding voor veilig gebruik voor waarschuwingen over toedieningssets

Toedieningsset bevestigen

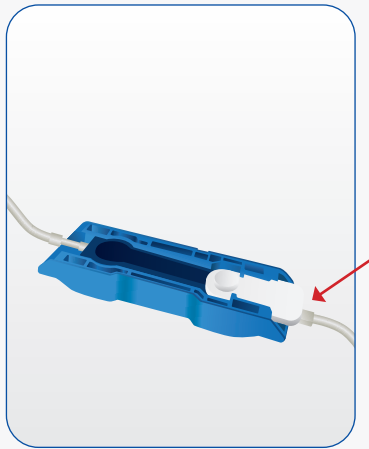

1. Verwijder de witte klem van de set. Als u de set opnieuw plaatst, slaat u deze stap over

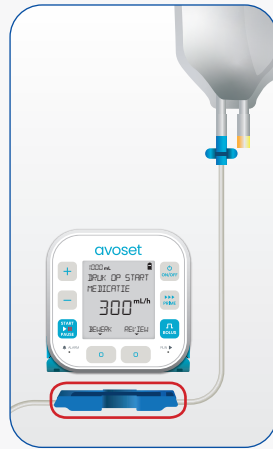

2. Plaats de cassette aan de onderkant van de pomp met de infuuszak aan de rechterkant



3. Duw de cassette in de pomp. U hoort twee klikken om aan te geven dat het volledig is ingeschakeld. Controleer of de set vastzit



4. Als de functie Herinnering vullen is ingeschakeld, vraagt de pomp of u de set hebt gevuld. Druk op de NEE multifunctioneleknop om aan te geven dat u nog niet hebt gevuld. Zie pagina 12 voor vullen




Vullen (lucht verwijderen)

Nadat de cassette in de pomp is geplaatst, vul de toedieningsset met vloeistof en verwijder alle lucht.




1. Druk NEE multifunctionele knop.
*Deze vraag verschijnt alleen als de functie Herinnering vullen is ingeschakeld

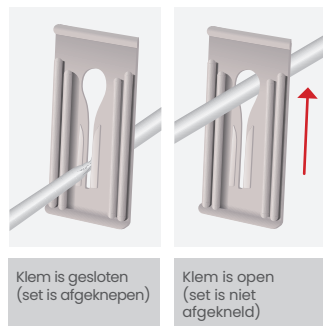

2. Open de klem (beweegt vrijuit)



3. Druk PRIME om te beginnen met vullen

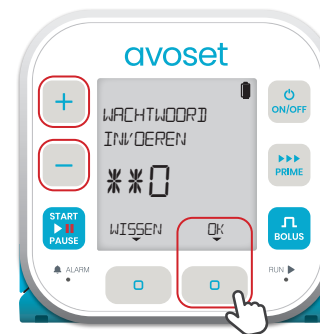

4. Het kan nodig zijn om een wachtwoord in te voeren. *Zie pagina 23 voor meer informatie over het wachtwoord



5. Zodra de patiënt is losgekoppeld van de toedieningsset, druk op de multifunctionele knop VULLEN om te beginnen met vullen



6. Indicatie voor het vulproces (beëindigt automatisch tenzij u drukt op STOPPEN multifunctionele knop)




7. Druk op de OK multifunctioneleknop



8. Controleer of er geen lucht in de set zit en of de vloeistof het einde van de set bereikt en druk op GEEN LUCHT. Druk anders VULLEN



9. Zodra de patiënt is aangesloten, druk OK multifunctionele knop

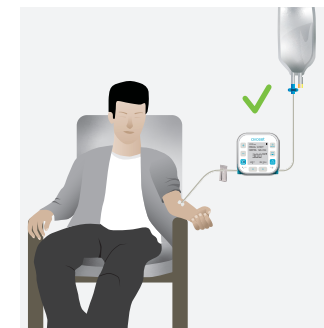

10. Sluit de toedieningsset, nadat het vullen geslaagd is, aan op de patiënt. De infusie is klaar

Vullen (lucht verwijderen)



Waarschuwing

- Vul niet wanneer de toedieningsset aangesloten is op de patiënt.
- Begin niet zonder te controleren of alle klemmen geopend zijn en of er geen occlusie is.
- Laat tijdens het vullen geen lucht in de toedieningsset komen.
- Gebruik de toedieningsset niet voordat u hebt gecontroleerd of alle lucht bellen zijn verwijderd.



Deze pagina is opzettelijk leeg gelaten

Infusie

Basisfuncties



Een nieuwe voorgeprogrammeerde infusie starten



1. Druk  om de infusie te starten



Het pictogram Uitvoeren draait

Groen lampje knippert

2. De infusie loopt



Waarschuwing


- Controleer altijd of het medicatiereservoir het juiste geneesmiddel bevat voordat u met een infusie begint.
- Wanneer u een toedieningsset met een filter gebruikt, plaatst u het filter onder (lager dan) het toegangspunt van de infuuslijn van de patiënt.

Pauzeren infusie


Door drukken **Pauze** en te bevestigen terwijl de pomp loopt, stopt de pomp.

Bevestiging kan worden uitgeschakeld door de programmeur. De pomp waarschuwt als deze gedurende een vooraf bepaalde periode is gepauzeerd en niet is aangeraakt (30 seconden, 1 minuut of 2 minuten)

Bevestiging
pauzeren
ingeschakeld

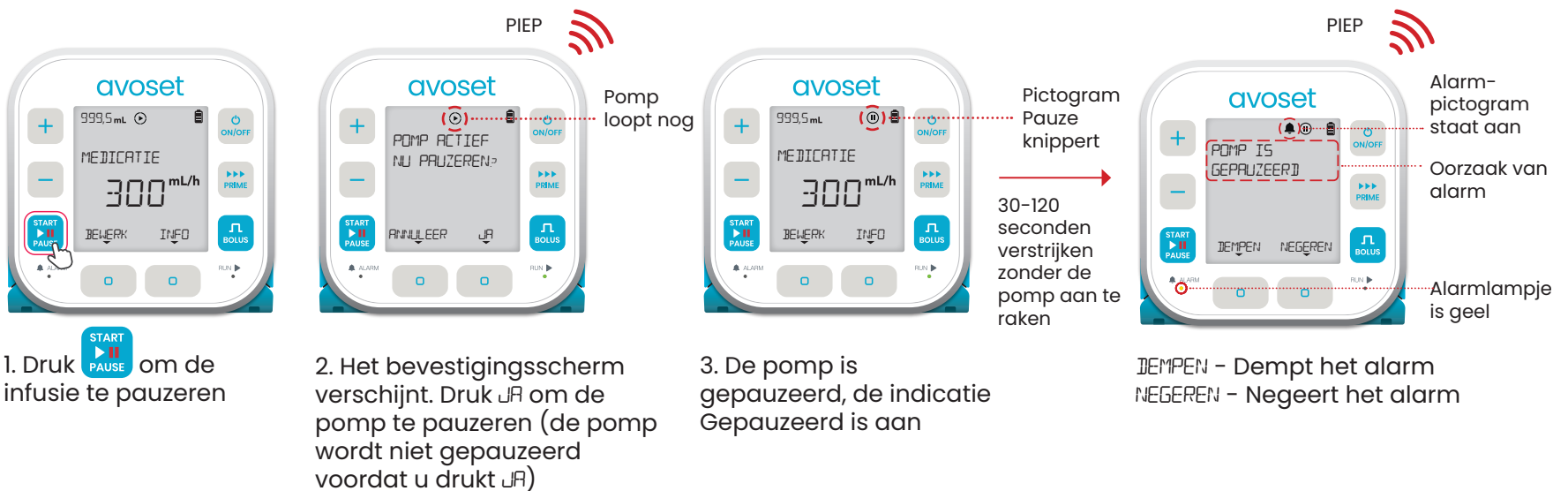

Bevestiging
pauzeren-
uitgeschakeld

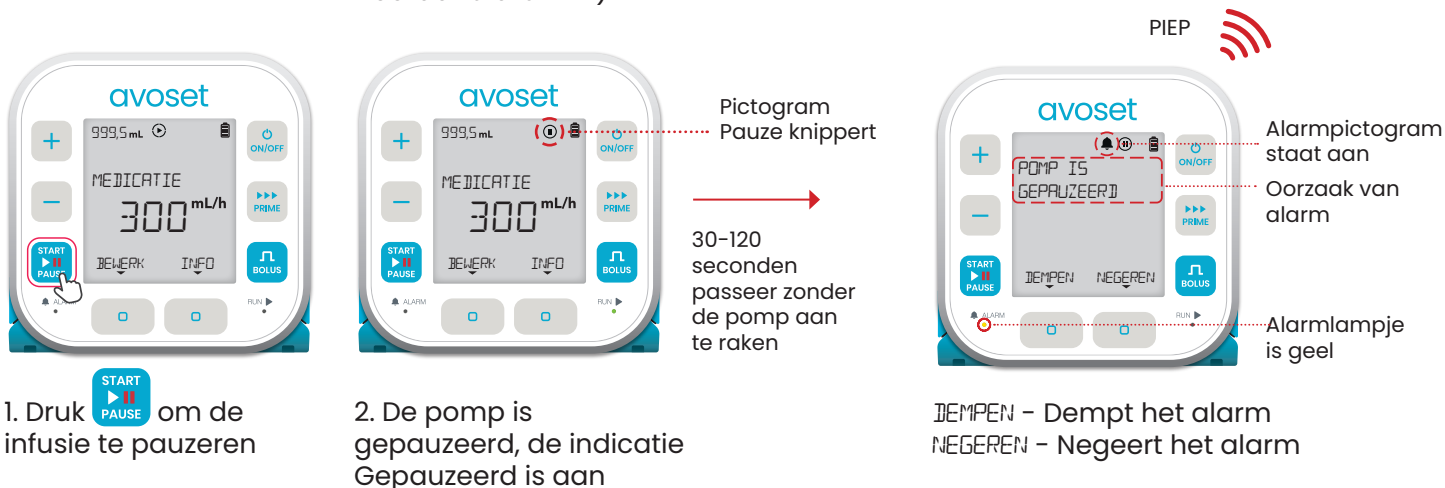

De pomp uitschakelen



1. Druk hierop  om de infusie te pauzeren



2. Druk en houd  knop ingedrukt om de pomp uit te schakelen



3. Houd de  toets ingedrukt totdat het display wordt uitgeschakeld



4. De pomp is uitgeschakeld

 Zie de volgende pagina om een infusie te hervatten nadat de pomp is uitgeschakeld.

Infusie hervatten of nieuwe zak starten

Als de pomp is uitgeschakeld of als de cassette tijdens een infusie is verwijderd en opnieuw aan de pomp is bevestigd, hebt u twee opties (i) Hervat de onvolledige infusie of (ii) Start een nieuwe zak om dezelfde infusie te herhalen met het oorspronkelijke volume van de zak.

(i) Hervat de onvolledige infusie



1. Druk **HERVAT** om de onderbroken infusie voort te zetten met het resterende volume in de zak



2. Druk **START PAUSE** om de infusie te hervatten



3. De onderbroken infusie loopt


Het pictogram Uitvoeren draait

Groen lampje knippert

(ii) Start nieuwe zak om de laatste infusie vanaf het begin te herhalen



1. Druk op **NIEUW ZAK** om dezelfde infusie opnieuw te herhalen met een nieuwe zak

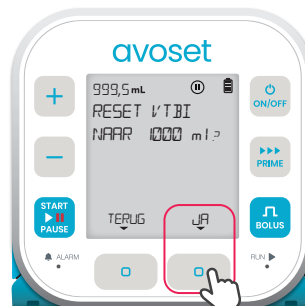

2. Druk **JA** om het resetten van het te infuseren infuusvolume (VTBI) te bevestigen



3. Druk hierop **START PAUSE** om een nieuwe infusie te starten



4. De nieuwe infusie loopt

Het pictogram Uitvoeren draait

Groen lampje knippert



Melding laag reservoirvolume

Als de pomp is ingesteld op een melding wanneer het medicatieniveau in het reservoir laag is, wordt u hierom gevraagd.



1. De pomp waarschuwt dat het reservoirvolume laag is, vergezeld van een pieptoon. Druk op de **OK** multifunctioneleknop

2. De infusie gaat door totdat het reservoir leeg is of totdat de infusie is voltooid

3. De pomp waarschuwt dat de infusie is voltooid. Volg einde van de infusie of herhaal de laatste infusie op pagina 21

Einde van infusie en laatste infusie herhalen

Einde van de Infusie



1. De pomp waarschuwt dat de infusie is voltooid. Druk **NEGEREN** multifunctionele knop




2. De pomp vraagt om de infuuszak te vervangen of de pomp uit te schakelen. Houd de **ON/OFF** toets ingedrukt om de pomp uit te schakelen. Zie pagina 21 om de laatste infusie te herhalen



3. Houd de **ON/OFF** toets ingedrukt totdat het display wordt uitgeschakeld



4. De pomp is uitgeschakeld

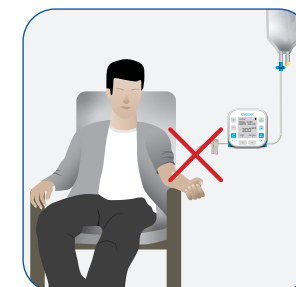

5. Koppel de set los van de patiënt

Laatste herhalen Infusie



1. De pomp waarschuwt dat de infusie is voltooid. Druk **NEGEREN** multifunctionele knop



2. Druk op **WIJZIG** de multifunctionele knop of verwijder de set en bevestig een nieuwe set en een nieuwe zak



3. Wijzig de medicatiezak en druk op **JA** multifunctionele knop




4. Pomp is klaar om nieuwe infusie te starten

i Als de infusie eindigt met KVO, sluit de KVO af voor herhalen van de infusie, zie pagina 22 voor instructies voor het stoppen met KVO



KVO na infusie afsluiten

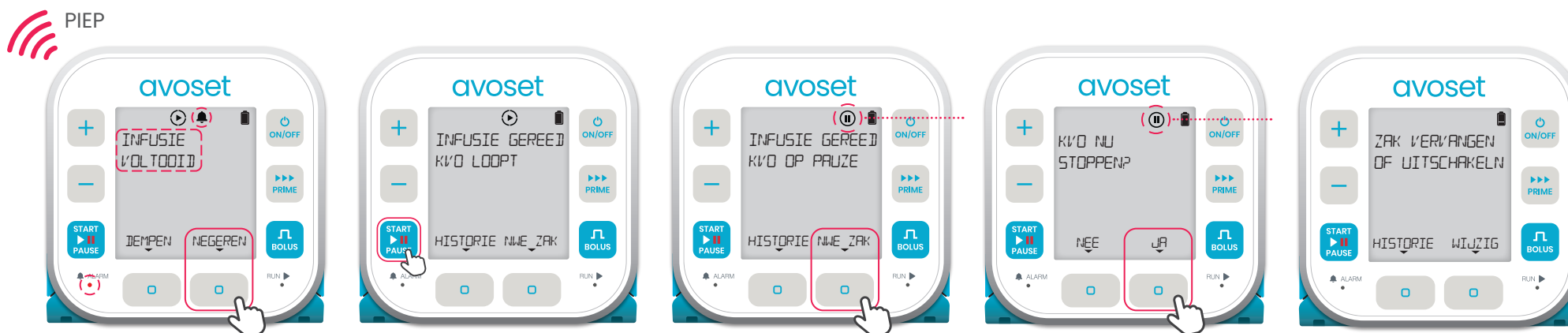

1. De pomp waarschuwt dat de infusie is voltooid. Druk **NEGEREN** multifunctionele knop

2. Druk **START PAUSE** om te pauzeren post infusie KVO

3. Druk op de **NWE_ZAK** multifunctionele knop

4. Druk op de **JA** multifunctionele knop om de KVO na infusie te stoppen

Zie pagina 21 om de laatste infusie te herhalen.
Zie pagina 20 om uit te schakelen

Ontgrendelen met een wachtwoord

Specifieke pompfuncties kunnen met een wachtwoord worden beveiligd om onbevoegde wijziging door de gebruiker te voorkomen.



1. De pomp vraagt u om een wachtwoord in te voeren. Het eerste cijfer knippert. Gebruik de **+** / **-** toetsen om het eerste cijfer in te stellen



2. Druk op de multifunctionele knop **VOLGENDE** zodra het gewenste cijfer is bereikt



3. Het tweede cijfer knippert. Gebruik de **+** / **-** toetsen om het tweede cijfer in te stellen en druk op de **VOLGENDE** multifunctionele knop



4. Het derde cijfer knippert. Gebruik de **+** / **-** toetsen om het derde cijfer in te stellen en druk op de multifunctionele **OK**-knop

Als het juiste wachtwoord wordt ingevoerd, wordt de pomp ontgrendeld. Anders wordt **VERKEERD WACHTWOORD** melding weergegeven



Toedieningsset verwijderen

Voordat u de toedieningsset verwijderd, sluit alle klemmen en ontkoppel de patiënt ervan.



1. Druk de ontgrendelingsknop aan de zijkant van de pomp omlaag



2. De cassette wordt losgemaakt van de pomp



3. De cassette verwijderen

i Lees de handleiding voor veilig gebruik voor informatie over het afvoeren van gebruikte verpakkingen, batterijen, toedieningssets en medicatiecontainers

Problemen met **alarmen** oplossen



Lijst met alarmen

ALARM TEKST	OORZAAK	PROBLEEMOPLOSSING	ALARMPRIORITEIT
INFUSIEBEHEER			
LUCHT IN LIJN LIJN VULLEN	Enkele of geaccumuleerde luchtbelllen gedetecteerd in de set	Ontkoppel de set los van de patiënt en vul de set (zie pagina 12)	Alarm met hoge prioriteit
CASSETTE FOUT GEPLAATST	De setcassette ontbreekt of is verkeerd in de pomp geplaatst	De cassette van de set verwijderen en opnieuw plaatsen	Alarm met hoge prioriteit
NEERWAARTSE OCCLUSIE	De slang die de pomp op de patiënt aansluit, is verstopt	Maak de slang recht, controleer op knikken, controleer of de set correct is geplaatst en of alle klemmen open zijn (zie pagina 32)	Alarm met hoge prioriteit
OPWAARTSE OCCLUSIE	De slang die de infuuszak met de pomp verbindt, is verstopt	Maak de slang recht, controleer op knikken, controleer of de set correct is geplaatst en of alle klemmen open zijn	Alarm met hoge prioriteit
CONTROLE LEGE SET/RESVOIR	2ml luchtbelllen gedetecteerd in de set	Als de zak niet leeg is, koppelt u de set los van de patiënt, vul de set en hervat de infusie (zie pagina 19). Als de zak leeg is, vervang deze en hervat de infusie	Alarm met hoge prioriteit
VERWIJDER SET PLAATS OPNIEUW	Pomp kon de toedieningsset niet identificeren	De cassette van de set verwijderen en opnieuw plaatsen	Alarm met hoge prioriteit
SET IS NIET GEVULD	De set is niet gevuld	Vul de set (zie pagina 12)	Alarm met lage prioriteit
SET VERVANGEN	De interne pomptest van de setcassette is mislukt	Verwijder de aangesloten toedieningsset en sluit een nieuwe set aan	Alarm met lage prioriteit

Lijst met alarmen

ALARM TEKST	OORZAAK	PROBLEEMOPLOSSING	ALARMPRIORITEIT
INFUSIEVOORTGANG			
INFUSIE VOLTOOID	De VTBI is toegediend	Vervang de zak of schakel de pomp uit (zie pagina 20)	Alarm met hoge prioriteit
VERVANG ZAK NU	De VTBI is toegediend	Zak vervangen	Alarm met hoge prioriteit
ACTIE ONVOLTOOID	De infusie is nog niet gestart, of een uitgevoerde actie is onvolledig en er is geen toets ingedrukt voor een vooraf gedefinieerde tijdsduur	Start de infusie of los de het onvolledige actie op	Alarm met lage prioriteit
POMP IS GEPAUZEERD	De infusie is al gestart en de pomp werd 30-120 seconden gepauzeerd	Druk Start/Pauze als de infusie moet worden hervat (zie pagina 30)	Alarm met lage prioriteit
TIJD OM ZAK TE VERVERGEN	Infusiezak is bijna leeg	Zak vervangen	Alarm met lage prioriteit
PLAATS POMP RECHTOP	De pomp heeft gedetecteerd dat deze niet rechtop staat	Plaats pomp rechtop De pomp hervat de infusie automatisch zodra deze weer rechtop staat.	Alarm met hoge prioriteit
BATTERIJ			
BATTERIJ LEEG	De batterijspanning is te laag om de pomp te bedienen	Batterijen vervangen (zie pagina 34)	Alarm met hoge prioriteit
(Scherm gaat uit met een knipperend rood lampje en een pieptoon)	De batterijen zijn verwijderd of de pomp is plotseling uitgevallen tijdens het gebruik	Vervang de batterijen (zie pagina 35). Controleer of de batterijen correct zijn geplaatst	Alarm met hoge prioriteit
BATTERIJ LAAG	De batterijen zijn bijna leeg	Batterijen vervangen (zie pagina 33)	Alarm met lage prioriteit



Lijst met alarmen

ALARM TEKST	OORZAAK	PROBLEEMOPLOSSING	ALARMPRIORITEIT
POMPSTORINGEN			
FOUT 1 VERVANG POMP	Een kritieke interne fout	Gebruik de pomp niet. Patiënten: neem contact op met uw dienstverlener, de pomp moet worden vervangen Niet-patiënten: schakel de pomp uit en stuur deze op voor onderhoud	Fout met hoge prioriteit
FOUT 2 VERVANG POMP	Een niet-kritieke interne fout	Gebruik de pomp niet. Patiënten: neem contact op met uw dienstverlener, de pomp moet worden vervangen Niet-patiënten: stuur een nieuw infusieprogramma naar de pomp	Fout met hoge prioriteit
FOUT 3 VERVANG POMP	Een interne klokfout	Gebruik de pomp niet. Neem contact op met uw dienstverlener	Fout met hoge prioriteit
FOUT 4 VERVANG POMP	Software-update voor de pomp mislukt	Gebruik de pomp niet. Patiënten: neem contact op met uw dienstverlener, de pomp moet worden vervangen Bij onderhoud: pomp software bijwerken	Fout met hoge prioriteit
HERSTART POMP	Een interne fout die de werking van de pomp verhindert	Herstart pomp. Als het alarm voor de tweede keer optreedt, vervangt u de pomp en neemt u contact op met uw dienstverlener	Alarm met hoge prioriteit
HOGЕ TEMPERATUUR	Pomp raakt oververhit	Schakel de pomp uit en laat deze afkoelen. Als de temperatuur nog steeds te hoog is wanneer de pomp wordt ingeschakeld, wordt het alarm opnieuw gegeven	Alarm met hoge prioriteit

Lijst met alarmen

ALARM TEKST	OORZAAK	PROBLEEMOPLOSSING	ALARMPRIORITEIT
POMPSTORINGEN			
HERSTELD VAN FOUT	Pomp opnieuw gestart na een interne fout	De onderbroken infusie kan niet worden hervat. VTBI werd gereset naar de aanvankelijk geprogrammeerde waarde. Als u de infusie start, wordt deze niet hervat van waar deze is gestopt voordat deze werd onderbroken	Alarm met hoge prioriteit
HOEKSENSOR WAARSCHUWING	De hoeksensor test is mislukt	Start de pomp opnieuw wanneer deze rechtop op een recht oppervlak staat. Als het alarm na het opnieuw opstarten opnieuw optreedt, contacteer uw dienstverlener om de pomp te vervangen	Alarm met lage prioriteit
TOETS VAST	Een toets zit vast of is te lang ingedrukt	Laat de ingedrukte toets los	Alarm met lage prioriteit
AUDIO WAARSCHUWING 1	De luidspreker en het back-up audiosysteem werken niet goed tijdens de infusie. Het alarm gaat niet vergezeld met audio	Ga door met de infusie terwijl u er rekening mee houdt dat er geen audio is. Neem contact op met uw dienstverlener	Alarm met lage prioriteit
AUDIO WAARSCHUWING 2	De luidspreker of zoemer werkt niet goed tijdens de infusie en de pomp gebruikt een back-up audiosysteem	Ga door met de infusie terwijl u er rekening mee houdt dat het geluid van de pomp anders kan zijn dan normaal. Neem contact op met uw dienstverlener	Alarm met lage prioriteit



Pomp is gepauzeerd



1. Druk  om de infusie te hervatten




2. De infusie loopt

Lucht in Lijn

De pomp detecteert een luchtbel. De toedieningsset moet worden gevuld



1. Druk **DEMPEN**-multifunctionele knop om het alarm gedurende 2 minuten uit te zetten

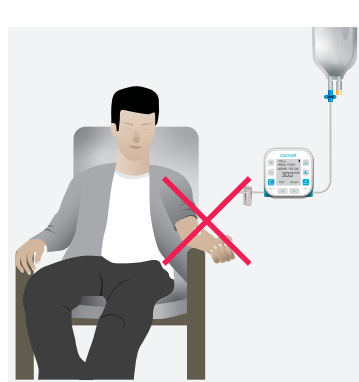

2. Koppel de toedieningsset los van de patiënt voordat u gaat vullen



3. Druk **PRIME** om te beginnen met vullen



4. Zorg dat de patiënt is losgekoppeld en druk **VULLEN** multifunctionele knop




5. Indicatie voor het vulproces (beëindigt automatisch tenzij u drukt op **STOPPEN** multifunctionele knop)




6. Druk op **OK** multifunctionele knop



7. Controleer of er geen lucht in de set zit en of de vloeistof het einde van de set bereikt en druk op **GEEN LUCHT**. Druk anders **VULLEN**

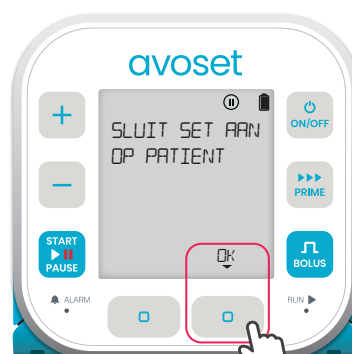

8. Zodra de patiënt is aangesloten, druk **OK** multifunctionele knop

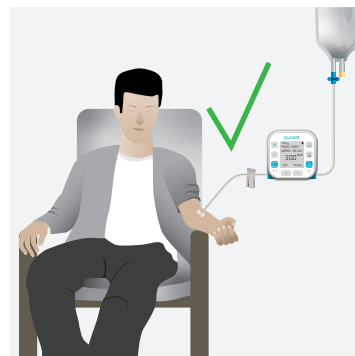

9. Sluit na succesvol vullen de toedieningsset aan op de patiënt



10. Druk **START PAUSE** om de infusie te hervatten




Stroomafwaartse occlusie

Redenen voor een occlusiealarm:




1. Klemmen zijn gesloten

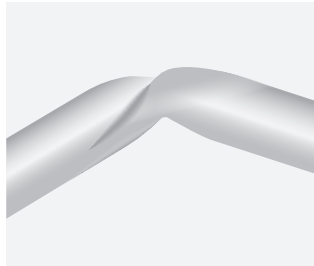


2. Set is geknikt



3. Toedieningssetcassette is ingedrukt

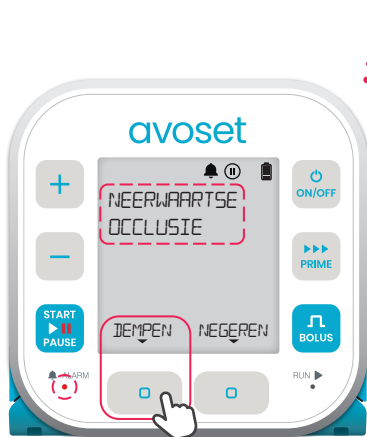

1. Druk op de **DEMPEN**-multifunctionele knop om het alarm gedurende 2 minuten te onderdrukken

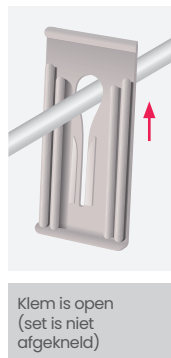

Klem is open (set is niet afgekneld)



Set is rechtgemaakt (geen knikken)



Setcassette is niet ingedrukt

2. Controleer of alle redenen voor occlusie zijn opgelost (open gesloten klemmen, maak knikken recht of controleer of de cassette niet is ingedrukt)



3. De infusie wordt automatisch hervat zodra de occlusie is verholpen.

Druk op **OK** om te bevestigen.

Als de pomp niet automatisch

wordt hervat, drukt u op de **START PAUSE** toets om de infusie te hervatten

Groen lampje knippert



4. De infusie loopt

Batterij bijna leeg

De batterijen raken binnen 30 minuten leeg voor de huidige lopende infusie.




i Infusie wordt opgeslagen wanneer batterijen worden verwijderd en kan later worden hervat.

1. Druk de **START PAUSE** om de infusie te pauzeren

2. Houd de **ON/OFF** toets ingedrukt om de pomp uit te schakelen




3. Druk de grendel van het batterijdeksel omlaag om het te openen

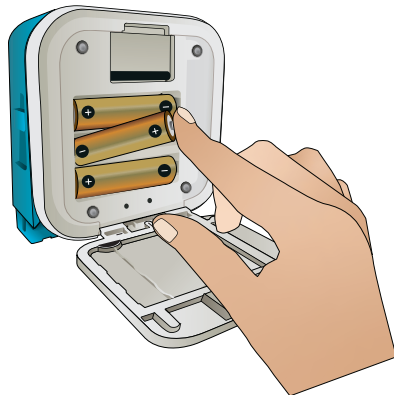

4. Verwijder elke batterij, te beginnen met de positieve (+) uiteinden



5. Plaats 3 AA (1,5 V) batterijen volgens het diagram in het batterijvak. Schuif eerst het negatieve (-) uiteinde, druk de veer in en klik het positieve (+) uiteinde op zijn plaats

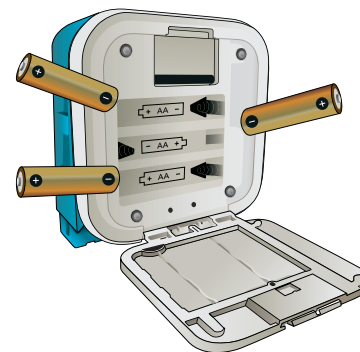

6. Sluit de batterijdeksel. Om de infusie te hervatten, schakel de pomp aan en selecteer **HERVAT** op de multifunctionele knop (zie pagina 19).




Batterij leeg

De batterijen raken binnen 3 minuten leeg.



PIEP

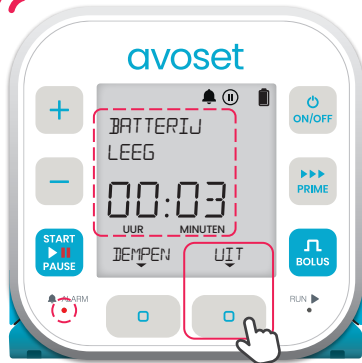

1. Druk op de **UIT** multifunctionele knop

Na 3 minuten zonder actief uitschakelen van de pomp wordt deze automatisch uitgeschakeld




2. De pomp is uitgeschakeld



Infusie wordt opgeslagen wanneer batterijen worden verwijderd en kan later worden hervat.




3. Druk de grendel van het batterijdeksel omlaag om het te openen

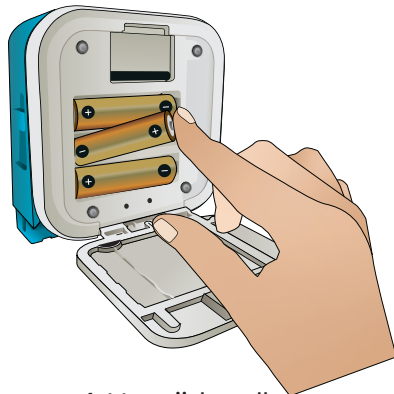

4. Verwijder elke batterij, te beginnen met de positieve (+) uiteinden




5. Plaats 3 AA (1,5 V) batterijen volgens het diagram in het batterijvak. Schuif eerst het negatieve (-) uiteinde, druk de veer in en klik het positieve (+) uiteinde op zijn plaats

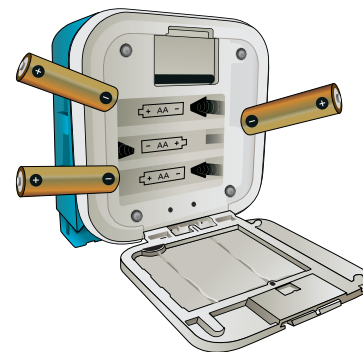

6. Sluit de batterijdeksel. Om de infusie te hervatten, schakel de pomp aan en selecteert u op **HERVAT** multifunctionele knop (zie pagina 19).


Batterij verwijderd

Een plotselinge stroomuitval of loskoppeling van de batterij terwijl de pomp is ingeschakeld.

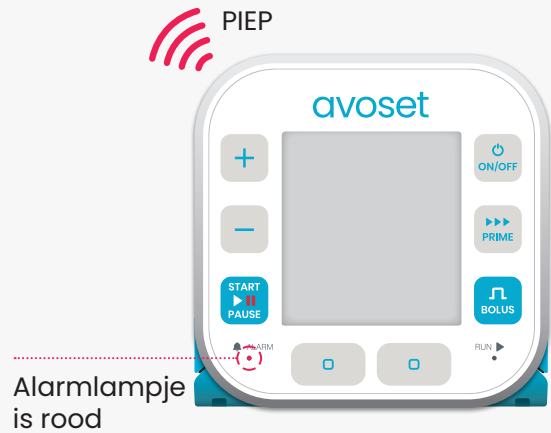


1. De pomp is uitgeschakeld

i Infusie wordt opgeslagen wanneer batterijen worden verwijderd en kan later worden hervat.

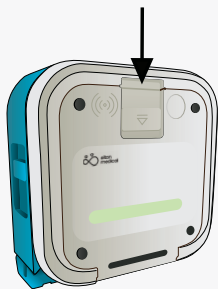


2. Druk de grendel van het batterijdeksel omlaag om het te openen

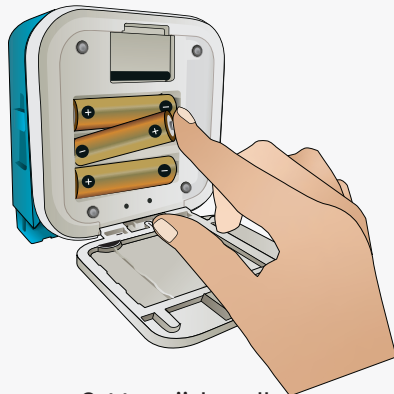

3. Verwijder elke batterij, te beginnen met de positieve (+) uiteinden



4. Plaats 3 AA (1,5 V) batterijen volgens het diagram in het batterijvak. Schuif eerst het negatieve (-) uiteinde, druk de veer in en klik het positieve (+) uiteinde op zijn plaats

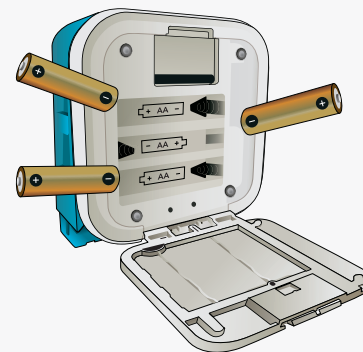

5. Sluit de batterijdeksel. Om de infusie te hervatten, schakel de pomp aan en selecteer HERVAT op de multifunctionele knop (zie pagina 19).





MedNet EC-REP IIb GmbH
Borkstrasse 10
48163 Münster, Germany



Eitan Medical Ltd.
29 Yad Haruzim St.
P.O. Box 8639
Netanya 4250529, Israel

