



avoset™

Beknopte handleiding

Intermitterend toediening

Rev. 3.0 softwareversie



Inhoudsopgave

Intermitterend infusie – Basisfuncties

Review voorgeprogrammeerde infusieparameters	4
Start aftellen wijzigen (tijd tot infusie begint)	5
Infusieparameters tijdens dosis controleren.....	6
Infusieparameters reviewen tijdens KVO (tussen doses)	7
Herinnering: Volgende dosis	8
De starttijd van de volgende dosis wijzigen.....	9
Tijd om zak te wijzigen	10
Vervang zak nu	11



Deze beknopte handleiding biedt richtlijnen voor de basisfuncties van de Avoset-infusiepomp. Als u geen arts bent, raadpleeg dan de handleiding Belangrijke gebruiksinformatie voor aanvullende informatie en het veilige gebruik van het product.


Voor zorgverleners die de beknopte handleiding gebruiken, zie de gebruikershandleiding.

Beknopte handleidingen, gebruikershandleidingen en gebruiksvoorwaarden voor trainingsmaterialen zijn te vinden op www.eitanmedical.com


Deze pagina is opzettelijk leeg gelaten



Review voorgeprogrammeerde infusieparameters

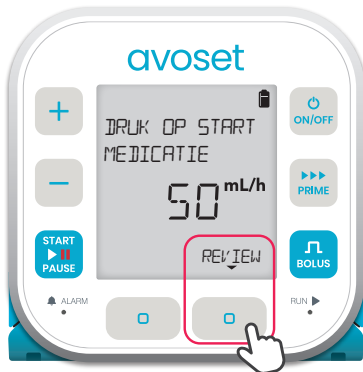


Druk **REVIEW** multifunctionele knop om de infusieparameters te zien

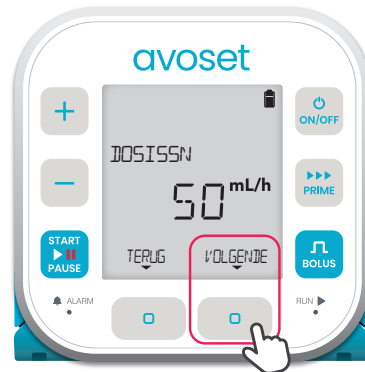

1e parameter:
De dosissnelheid




2e parameter:
Het volume dat in één dosis moet worden geïnfuseerd

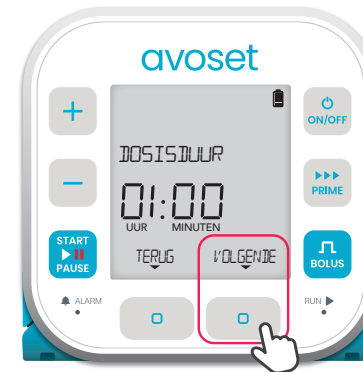

3e parameter:
De tijd die nodig is om een enkele dosis te voltooien



4e parameter:
De tijd tussen doses

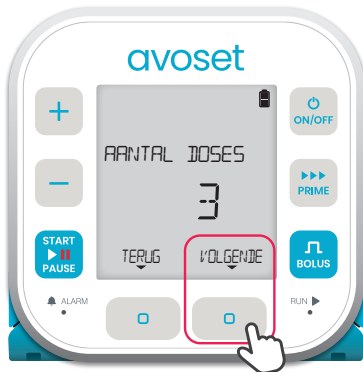


5e parameter:
De totale aantal doses die tijdens de infusie moet worden toegediend



6e parameter:
De Keep Vein Open snelheid (KVO)



7e parameter:
De tijd die nodig is om de infusie te voltooien

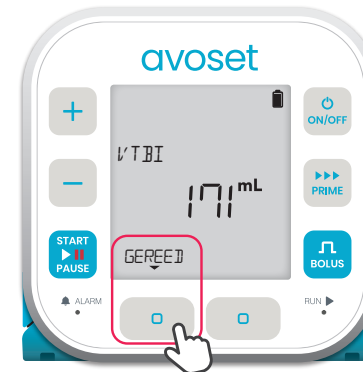

8e parameter:
Het totale volume dat tijdens de infusie moet worden geïnfuseerd. Druk op **GEREED** om de beoordeling van de parameters te voltooien



Terug naar hoofdscherm (**REVIEW** optie is opnieuw beschikbaar)


i Afhankelijk van de infusieprogrammering kunnen aanvullende parameters worden weergegeven. Raadpleeg de gebruikershandleiding voor meer informatie.

Start aftellen wijzigen (tijd tot infusie begint)

Als de infusie is ingesteld om later te starten (uitstel), kan de afteltimer voor de start worden gewijzigd voordat de infusie begint. U kunt de aftelprocedure voor of na het indrukken wijzigen 




1. Druk op **BEWERK** multifunctionele knop

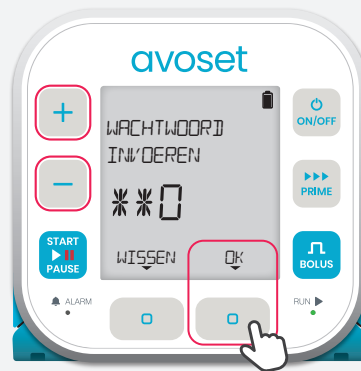

2. De pomp vraagt u om een wachtwoord in te voeren. Gebruik de **+** / **-** toetsen om de drie cijfers in te stellen en druk op de **OK** multifunctionele knop



3. Om start aftellen te wijzigen, gebruik de **+** / **-** toetsen en drukt u op **OK**. Druk op **TERUG** om de parameter onbewerkt te houden.

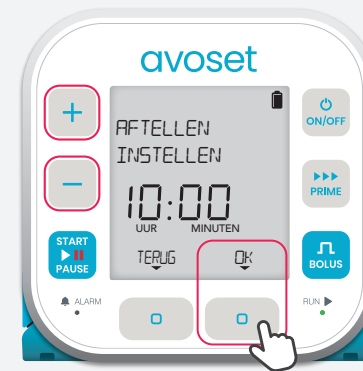

4. Review de bewerkte parameter. Om te bevestigen drukt u op **BEVESTIG**, om te wijzigen drukt u op **BEWERK**



5. Als u wilt dat de infusie automatisch start wanneer het aftellen is voltooid, drukt u op 



6. Het aftellen van de start wordt weergegeven. De infusie start wanneer het aftellen is voltooid



Infusieparameters tijdens dosis controleren



Druk **INFO** multifunctionele knop om de infusieparameters te zien



1e parameter:
De resterende tijd om de huidige dosis te voltooien



2e parameter:
De resterende tijd om de infusie te voltooien



3e parameter:
Het tot nu toe geïnfuseerde totale volume



4e parameter:
Het resterende te infuseren volume



5e parameter:
Het volume dat in één dosis moet worden geïnfuseerd



6e parameter:
De dosissnelheid



7e parameter:
De KVO-snelheid




8e parameter:
De tijd tussen doses. Druk op de multifunctionele knop **GEREE** om naar het hoofdscherm te navigeren



Terug naar hoofdscherm (**INFO** optie is opnieuw beschikbaar)

i Afhankelijk van de infusieprogrammering kunnen aanvullende parameters worden weergegeven. Raadpleeg de gebruikershandleiding voor meer informatie.


Infusieparameters reviewen tijdens KVO (tussen doses)

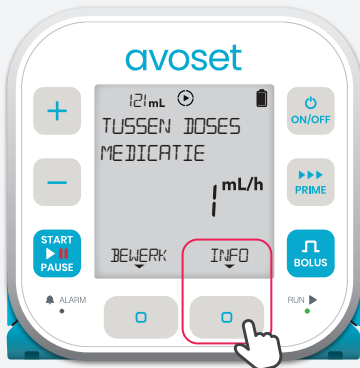

Druk **INFO** multifunctionele knop om de infusieparameters te zien



1e parameter:
Het aantal tot nu toe toegediende doses van de totale doses

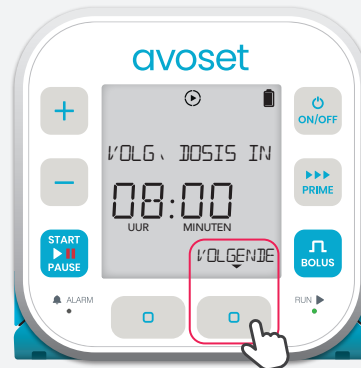


2e parameter:
De resterende tijd voordat de volgende dosis begint



3e parameter:
De resterende tijd om de infusie te voltooien




4e parameter:
Het tot nu toe geïnfuseerde totale volume

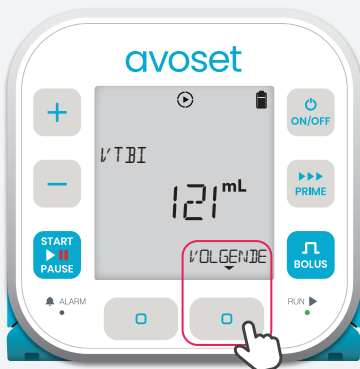

5e parameter:
Het resterende te infuseren volume



6e parameter:
Het volume dat in één dosis moet worden geïnfuseerd

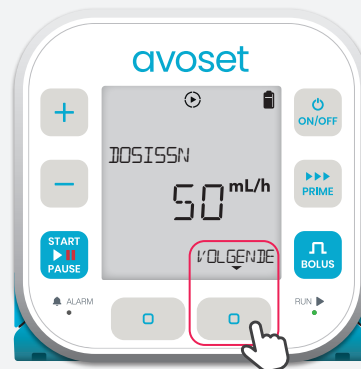

7e parameter:
De dosissnelheid



8e parameter:
De KVO-snelheid. Druk **GEREE** de multifunctionele knop om naar het hoofdscherm te navigeren



Terug naar hoofdscherm (**INFO** optie is opnieuw beschikbaar)

i Afhankelijk van de infusieprogrammering kunnen aanvullende parameters worden weergegeven. Raadpleeg de gebruikershandleiding voor meer informatie.



Herinnering: Volgende dosis


Als de pomp is ingesteld om u eraan te herinneren wanneer de volgende dosis moet worden toegediend, wordt u gevraagd om de infusie handmatig te hervatten als de pomp tussen de doses door is gepauzeerd:



1. De melding VLGND DOSIS IN toont hoeveel tijd er nog over is voordat de volgende dosis moet beginnen. Druk **NEGEREN** multifunctionele knop



2. De melding DOSIS NU NODIG wordt weergegeven wanneer de volgende dosis moet beginnen. Druk **NEGEREN** multifunctionele knop

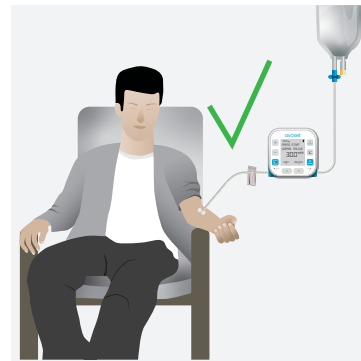

3. Controleer of de set is aangesloten op de patiënt



4. Druk **START PAUSE** om de infusie te hervatten

De starttijd van de volgende dosis wijzigen

Wanneer de pomp wordt gepauzeerd tussen doses (tijdens KVO), kan de tijd tot de volgende dosis begint worden verkort



1. Druk  om de infusie te pauzeren




2. Druk op de **BEWERK** multifunctionele knop om de resterende tijd tot de volgende dosis te verkorten



3. Het kan nodig zijn om een wachtwoord in te voeren. Gebruik de  toetsen om het wachtwoord in te stellen en druk op **OK**



4. Gebruik  toets om de resterende tijd voor de volgende dosis in te korten

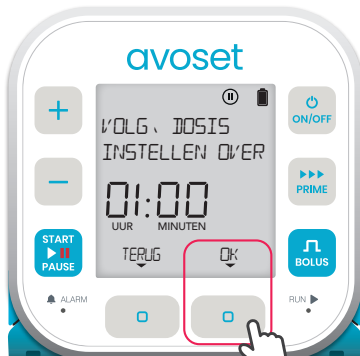

5. Druk op de **OK** multifunctionele knop om de geselecteerde tijd in te stellen



6. Review de bewerkte tijd. Om te bevestigen druk op **BEVESTG**. Om deze te wijzigen druk op **BEWERK**



7. Terug naar hoofdscherm (de optie INFO is opnieuw beschikbaar) Druk op  om te hervatten



 Door deze dosis eerder toe te dienen, worden alle resterende doses ook eerder toegediend.




Tijd om zak te wijzigen

Wanneer de laatste dosis volledig is toegediend, vraagt de pomp u om de zak te vervangen:



De pomp meldt wanneer de laatste dosis in de zak is toegediend

De infusie doorgaan met een NWE ZAK:

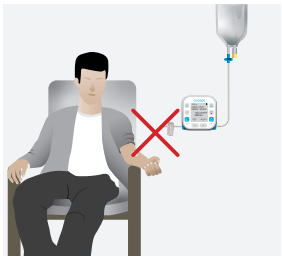

1. Koppel de set los van de patiënt



2. Druk de ontgrendelingsknop omlaag en verwijder de gebruikte cassette en zak



3. Volg de infuusinstellingen op pagina 6



4. Druk op NWE_ZAK multifunctionele knop



5. Druk op JA multifunctionele knop



6. Druk hierop om de infusie te hervatten; de dosis wordt volgens plan toegediend

i Voor een veilig gebruik moet u het installatieproces voltooien voordat u naar stap 4 gaat.


Vervang zak nu

Als de zak nog niet is vervangen en de volgende geplande dosis aan de beurt is, vraagt de pomp om de zak nu te vervangen (onmiddellijk):



De pomp meldt wanneer de laatste dosis in de zak is toegediend

De infusie doorgaan met een NWE ZAK:

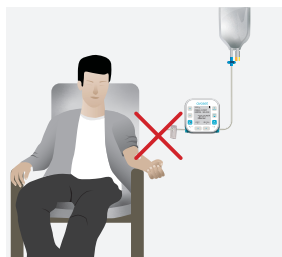

1. Koppel de set los van de patiënt



2. Druk de ontgrendelingsknop omlaag en verwijder de gebruikte cassette en zak



3. Volg de infuusinstellingen op pagina 6



4. Druk op NWE ZAK multifunctionele knop



5. Druk op JA multifunctionele knop



6. Druk hierop om de infusie te hervatten; de dosis wordt onmiddellijk toegediend

i Voor een veilig gebruik moet u het installatieproces voltooien voordat u naar stap 4 gaat.





MedNet EC-REP IIb GmbH
Borkstrasse 10
48163 Münster, Germany



Eitan Medical Ltd.
29 Yad Haruzim St.
P.O. Box 8639
Netanya 4250529, Israel



0123