



avoset™

Beknopte handleiding

PIB + PCA-toediening

Rev. 3.0 softwareversie



Inhoudsopgave

PIB + PCA-infusie – Basisfuncties

Voorgeprogrammeerde infusieparameters reviewen	3
Wijzig de eerste dosis starttijd voor infusie begint	4
Wijzig de starttijd van de eerste dosis nadat infusie begint	5
Infusieparameters wijzigen	6
Review infusieparameters tijdens infusie	8
Patiëntbolus toedienen	10
Arts dose toedienen	12
Stoppen arts dose	13



Deze beknopte handleiding biedt richtlijnen voor de basisfuncties van de Avoset-infusiepomp. Raadpleeg de gebruikershandleiding en de gebruiksvoorwaarden van het trainingsmateriaal op onze website: www.eitanmedical.com/term_training_materials

Voorgeprogrammeerde infusieparameters reviewen




Druk **REVIEW** multifunctionele knop om de infusieparameters te zien




1e parameter (optioneel): De concentratie van het geneesmiddel



2e parameter: Het totale te infuseren volume (VTBI)

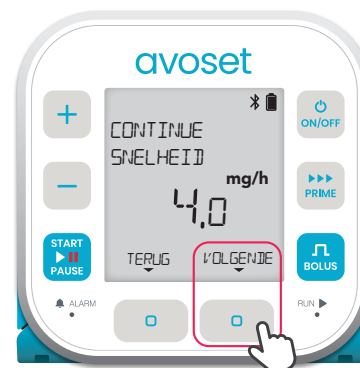


3e parameter: De infusiesnelheid tussen bolussen

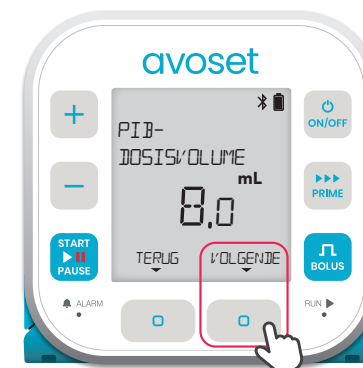

4e parameter: Volume toegediend voor elke PIB-dosis



5e parameter: Tijdsinterval tussen het begin van de ene PIB-dosis en de volgende

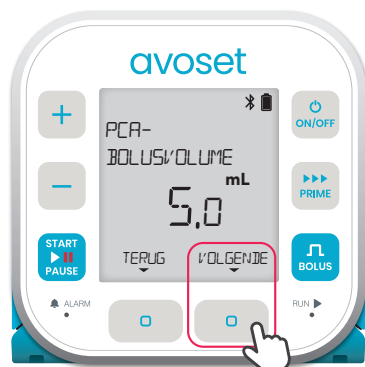

6e parameter: Het volume dat moet worden geïnfuseerd in een bolus voor één patiënt



7e parameter: De tijd tussen bolussen waarin de gebruiker geen bolus kan starten



8e parameter: De tijd vanaf het begin van de infusie tot de eerste PIB-dosis wordt toegediend



Terug naar hoofdscherm (**REVIEW** optie is opnieuw beschikbaar)

i Afhankelijk van de infusieprogrammering kunnen aanvullende parameters worden weergegeven. Raadpleeg de gebruikershandleiding voor meer informatie.



Wijzig de eerste dosis starttijd **voor** infusie begint



1. Druk op de multifunctionele knop **BEWERKEN**



2. De pomp vraagt u om een wachtwoord in te voeren. Gebruik de **+** / **-** toetsen om de drie cijfers in te stellen en druk op de **OK** multifunctionele knop



3. Om de timing van de eerste PIB-dosis te wijzigen, gebruik de **+** / **-** toetsen en druk **OK**. Druk op **TERUG** om de parameter onbewerkt te houden



4. Review de bewerkte parameter. Om te bevestigen drukt u op **BEVESTG**, om te wijzigen drukt u op **BEWERK**



5. Druk op **START** om de infusie te starten. De infusie begint met de geprogrammeerde continue snelheid en de eerste PIB-dosis begint volgens de eerste dosis na de parameter

Wijzig de starttijd van de eerste dosis **nadat** infusie begint

De starttijd van de eerste dosis kan worden bewerkt nadat de infusie begint, vóór de eerste PIB-dosis.



1. Als de infusie loopt, druk **START/PAUSE** om de infusie te pauzeren



2. Druk op de multifunctionele knop **BEWERK**



3. De pomp vraagt u om een wachtwoord in te voeren. Gebruik de **+** / **-** toetsen om de drie cijfers in te stellen en druk op de **OK** multifunctionele knop



4. Om de timing van de eerste PIB-dosis te wijzigen, gebruik de **+** / **-** toetsen en druk **OK**. Druk op **TERUG** om de parameter onbewerkt te houden



5. Review de bewerkte parameter. Om te bevestigen drukt u op **BEVESTG**, om te wijzigen drukt u op **BEWERK**



6. Druk **START/PAUSE** om de infusie te hervatten



7. Terug naar continue-snelheid



Infusieparameters wijzigen

Een PIB + PCA-infusie kan worden bewerkt voordat de infusie wordt gestart of wanneer de infusie wordt gepauzeerd. De wijzigingen zijn van toepassing op de huidige infusie en toekomstige herhaalde infusies.



1. Als de infusie loopt, druk  om de infusie te pauzeren



2. Druk op de multifunctionele knop **BEWERK**



3. De pomp vraagt u om een wachtwoord in te voeren. Gebruik de  /  toetsen om de drie cijfers in te stellen en druk op de **OK** multifunctionele knop



4. Om de weergegeven parameter te bewerken, gebruik de  /  toetsen en druk op **OK**. Om de parameter niet te bewerken Druk **SLA OVER**

Infusieparameters wijzigen



5. Druk **NEE** om het bewerken te voltooien of druk op **JA** om aanvullende parameters te bewerken



6. Review de bewerkte parameters, om te bevestigen druk op **BEVESTIG**, voor wijzigen druk **BEWERK**



7. Druk **START PAUSE** om de infusie te hervatten



8. Terug naar continue-snelheid

i De parameters die op de pomp kunnen worden bewerkt zijn: VTBI (alleen vóór de start van de infusie), continue-snelheid, PIB-dosisvolume, dosisinterval, PCA-bolusvolume, blokkeringsduur. Om andere parameters te bewerken, stuur een nieuw programma vanuit de programmeertool de pc.



Review infusieparameters tijdens infusie



Druk INFO multifunctionele knop om de infusieparameters te zien



1e parameter:
De resterende tijd voordat de volgende dosis begint



2e parameter:
Het tot nu toe geïnfuseerde totale volume



3e parameter:
Het totale te infuseren volume (VTBI)


Parameters bolusgeschiedenis



4e parameter:
De verstreken tijd sinds bolusgeschiedenis voor het laatst werd gewist



5e parameter:
Het aantal aangevraagde bolussen en gegeven bolussen

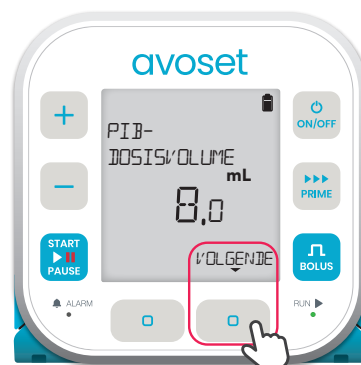

6e parameter:
Volume toegediend voor elke PIB-dosis



7e parameter:
Tijdsinterval tussen het begin van de ene PIB-dosis en de volgende

Review infusieparameters tijdens infusie



8e parameter:
De infusiesnelheid tussen
PIB-doses



9e parameter:
Het volume dat moet
worden geïnfuseerd in een
bolus voor één patiënt



10e parameter:
Resterende tijd totdat een bolus
kan worden toegediend.
*Wanneer er een bolus
beschikbaar is, wordt deze
parameter niet weergegeven



11e parameter:
De concentratie van het
geneesmiddel


i Afhankelijk van de infusieprogrammering kunnen aanvullende parameters worden weergegeven. Raadpleeg de gebruikershandleiding voor meer informatie.

Tip: Lang indrukken VOLGENDE multifunctieknop keert terug naar het startscherm



Patiëntbolus toedienen


Geen bolus bevestiging

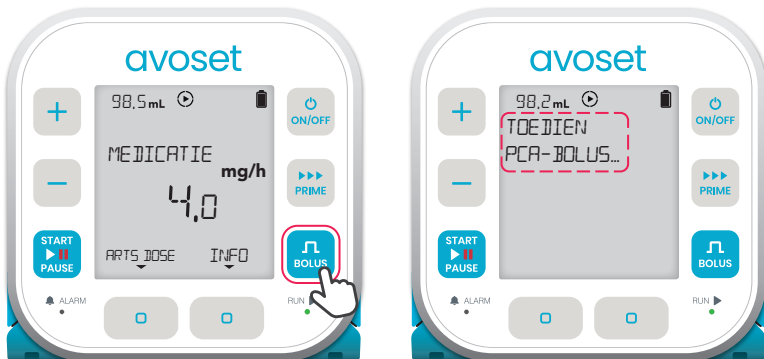

1. Druk  om een PCA-bolus te starten

2. PCA-bolustoedienings indicatie

Bevestiging bolus geactiveerd

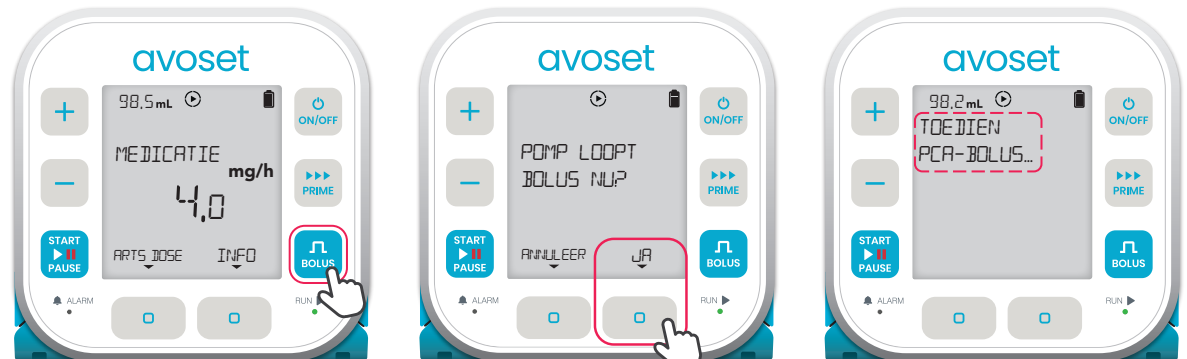

1. Druk  om een PCA-bolus te starten

2. Het bevestigingsscherm verschijnt. Druk op  om de PCA-bolus toe te dienen

3. PCA-bolustoedienings indicatie

Patiëntbolus toedienen



Nadat een PIB-dosis of PCA-bolus is toegediend of wanneer de extra dosislímiet is bereikt, wordt een wachttijd geactiveerd. Gedurende deze tijd worden er geen extra bolussen toegediend.

Als u drukt op de toets  wordt deze melding geactiveerd




Arts dose toedienen

De arts dose is een optionele manier voor de zorgverlener om een dosis voor de patiënt toe te voegen tijdens een PIB + PCA-behandeling.




1. Druk op de **ARTS.DOSE** multifunctionele knop om te beginnen met het instellen van de arts dose

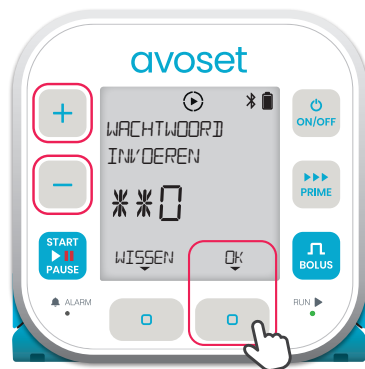

2. De pomp vraagt u om een wachtwoord in te voeren. Gebruik de **+** / **-** toetsen om de drie cijfers in te stellen en druk op de **OK** multifunctionele knop



3. Gebruik de **+** / **-** toetsen om de waarde te wijzigen. Druk op de **OK** multifunctionele knop om goed te keuren en door te gaan

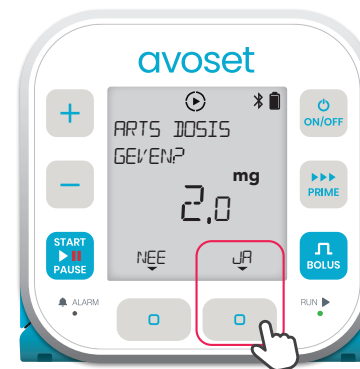

4. Druk op de **JA** multifunctionele knop om de arts dose goed te keuren en de toediening te starten



5. Indicaties voor toediening van arts dose

i De arts dose kan worden uitgeschakeld via het programmeertool van de pc. Wanneer de arts dose is uitgeschakeld, is de **ARTS.DOSE** knop niet beschikbaar

Stoppen arts dose



1. Druk hierop  om de arts dose te pauzeren



2. Druk op AFSLUITEN multifunctionele knop om de arts dose af te sluiten



3. Druk JA multifunctionele knop om de arts dose te stoppen



4. Druk JA multifunctionele knop om de continue-snelheid te hervatten



5. Terug naar continue-snelheid



Deze pagina is opzettelijk leeg gelaten

Deze pagina is opzettelijk leeg gelaten





MedNet EC-REP IIb GmbH
Borkstrasse 10
48163 Münster, Germany



Eitan Medical Ltd.
29 Yad Haruzim St.
P.O. Box 8639
Netanya 4250529, Israel



0123