



avoset™

Beknopte handleiding

Afbouw toediening

Rev. 3.0 softwareversie



Inhoudsopgave

Afbouw infusie – Basisfuncties

Voorgeprogrammeerde infusieparameters reviewen	4
Infusieparameters wijzigen	5
Review infusieparameters tijdens infusie	6
Onmiddellijke afbouw.....	7


 Deze beknopte handleiding biedt richtlijnen voor de basisfuncties van de Avoset-infusiepomp. Als u geen arts bent, raadpleeg dan de handleiding Belangrijke gebruiksinformatie voor aanvullende informatie en het veilige gebruik van het product. Voor artsen die de beknopte handleiding gebruiken, raadpleeg de gebruikershandleiding en de gebruiksvoorwaarden van het trainingsmateriaal op onze website: www.eitanmedical.com/term_training_materials/

Deze pagina is opzettelijk leeg gelaten



Voorgeprogrammeerde infusieparameters reviewen


Druk VOLGENDE om tussen de infusieparameters te navigeren

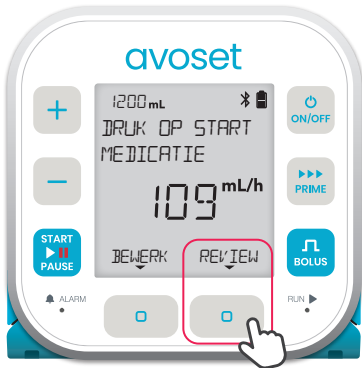


Druk **REVIEW**
multifunctionele knop om de
infusieparameters te zien



1e parameter:
De infusiesnelheid tussen
afbouw fasen

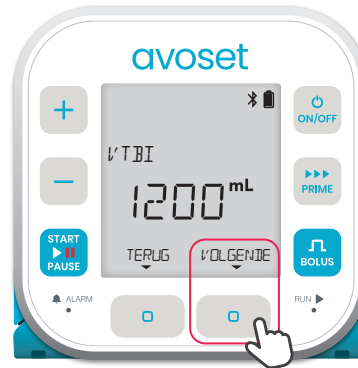

2e parameter:
Het totale te infuseren
volume (VTBI)

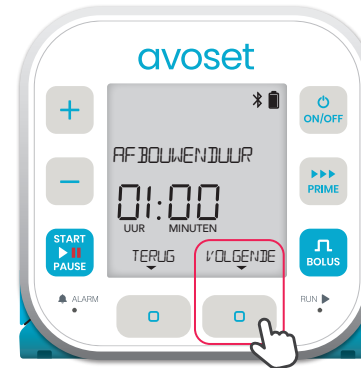

3e parameter (optioneel):
Hoe lang de snelheid
toeneemt totdat de
plateausnelheid is bereikt



4e parameter (optioneel):
Hoe lang de snelheid
afneemt vanaf het einde
van de plateausnelheid



5e parameter:
De tijd die nodig is om de
infusie te voltooien. Druk
GEREE voor review van de
parameters te voltooien



Terug naar hoofdscherm
(REVIEW optie is opnieuw
beschikbaar)



Afhankelijk van de infusieprogrammering kunnen aanvullende parameters worden weergegeven. Raadpleeg de gebruikershandleiding voor meer informatie.

Infusieparameters wijzigen

Het bewerken van een afbouw infusie is alleen mogelijk voordat de infusie begint, de wijzigingen zijn van toepassing op de huidige infusie en toekomstige herhaalde infusies. Het onderstaande voorbeeld toont hoe u de opbouwduur bewerkt en de VTBI onveranderd houdt



1. Druk op de **BEWERK** multifunctionele knop om de infusieparameters te wijzigen



2. Om een parameter over te slaan en niet te bewerken, druk **SLA OVER** multifunctionele knop




3. Om een parameter te bewerken, gebruik de **+** / **-** toetsen om in dit geval de opbouwduur te wijzigen



4. Druk **OK** multifunctionele knop zodra de vereiste duur wordt weergegeven



5. Druk **NEE** om het bewerken te voltooien of druk **JA** om aanvullende parameters te bewerken

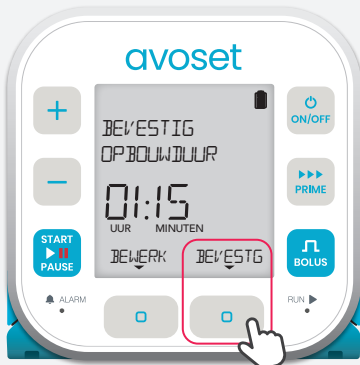

6. Review de bewerkte parameters, om te bevestigen druk op **BEVESTIG**, voor wijzigen druk **BEWERK**




7. Terug naar hoofdscherm (de optie **REVIEW** is opnieuw beschikbaar)



Review infusieparameters tijdens infusie



Druk INFO multifunctionele knop om de infusieparameters te zien

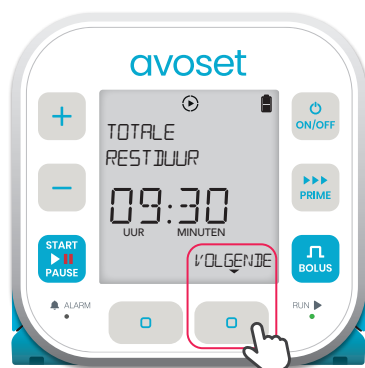

1e parameter:
De tijd die nodig is om de infusie te voltooien




2e parameter:
Het tot nu toe geïnfuseerde totale volume




3e parameter:
Het resterende te infuseren volume



4e parameter:
De infusiesnelheid tussen afbouw fasen

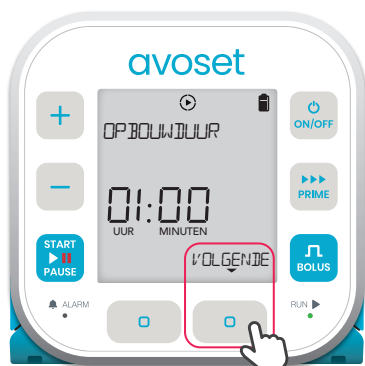

5e parameter (optioneel):
De tijdsduur gedurende welke de snelheid geleidelijk toeneemt totdat de plateausnelheid is bereikt

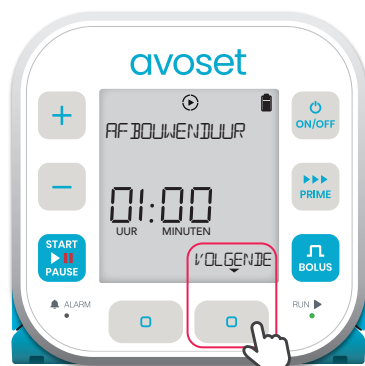

6e parameter (optioneel):
De tijdsduur gedurende welke de snelheid geleidelijk afneemt aan het einde van de plateaufase



Druk op de multifunctionele knop GEREED om naar het hoofdscherm te navigeren



Terug naar hoofdscherm (de optie INFO is opnieuw beschikbaar)

Onmiddellijke afbouw

De behandeling kan indien nodig voortijdig worden beëindigd met behulp van de optie “onmiddellijke afbouw” (indien beschikbaar). Het start onmiddellijk de afbouwfase zoals geprogrammeerd.



1. Druk AFBOUW multifunctionele knop om de infusie te beëindigen



2. Druk op de JA multifunctionele knop om de Afbouwen fase te starten



3. Afbouwen fase wordt uitgevoerd





MedNet EC-REP IIb GmbH
Borkstrasse 10
48163 Münster, Germany



Eitan Medical Ltd.
29 Yad Haruzim St.
P.O. Box 8639
Netanya 4250529, Israel

